

Ricerca del SANGUE OCCULTO nelle FECI

INDICAZIONI per la RACCOLTA

- Le feci devono essere raccolte su una superficie asciutta e **pulita** (padella da letto, foglio di carta resistente o piatto di plastica).

- **NON DEVONO ESSERE CONTAMINATE CON URINA O ACQUA DELLO SCARICO DEL WATER.**

- Le feci devono essere emesse in modo spontaneo, **senza fare uso di lassativi.**

- Per migliorare l'esito della ricerca delle tracce di sangue si consiglia di eseguire la raccolta in **3 giornate** consecutive.


- Quando vengano prodotti più campioni, è opportuno conservarli a **temperatura compresa tra 2°C e 8°C** fino ad un massimo di 3 giorni dalla raccolta, in attesa di consegnarli in laboratorio.

- I campioni **NON** devono essere raccolti durante o nei giorni successivi al **ciclo mestruale** o se il paziente soffre di **emorroidi** o se ha ravvisato tracce di **sangue nelle urine.**

Ricerca del SANGUE OCCULTO nelle FECI

PROTOCOLLO per la RACCOLTA

1. Utilizzare il flacone con il liquido conservante fornito dal laboratorio (Fig.1).

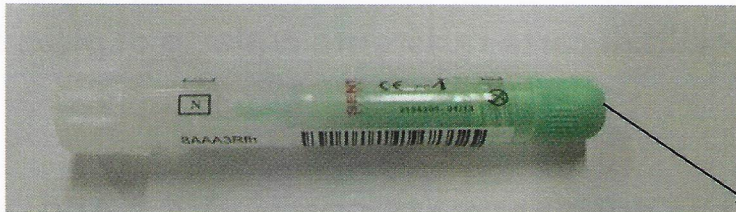

tappo verde da svitare

2. Svitare il cappuccio verde zigrinato del flacone ed estrarre il bastoncino con cui raccogliere il campione di feci.
3. Raccogliere il campione inserendo il bastoncino nelle feci in più punti e reintrodurlo nel flacone, avvitandolo per bene.
4. Non raccogliere feci in eccesso



Bastoncino per la raccolta

5. Agitare con moderazione così da omogeneizzare le feci nel liquido conservante.
6. Conservare il campione a 2°-8°C e consegnarlo in laboratorio nel più breve tempo possibile.